





PowerTel 30

Bruks-
anvisning



En överblick

Vänligen öppna denna sida för en överblick av din Powertel 30

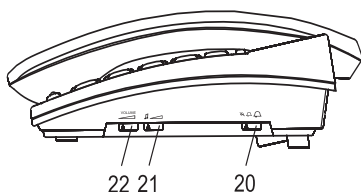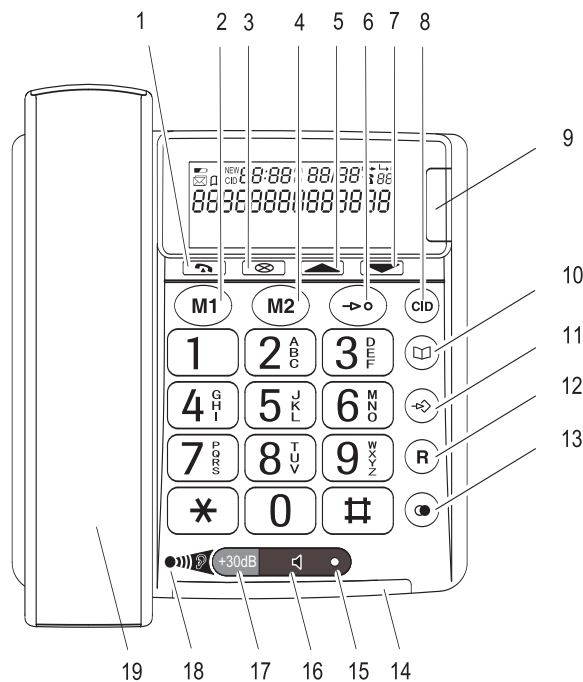

- 1 Lurknapp
- 2 Snabbvalsminne M1
- 3 Radera /Spara
- 4 Snabbvalsminne M2
- 5 Bläddra uppåt
- 6 Kortnummer
- 7 Bläddra nedåt
- 8 Samtalslista/Avbryta
- 9 Inkommande samtal (se sidan 28)
- 10 Telefonbok
- 11 Spara nummer
- 12 R knapp
- 13 Återupprigningsknapp
- 14 Lysdiod, inkommande samtal
- 15 Lysdiod, högtalar läge
- 16 Högtalar läge
- 17 Boost-funktion
- 18 Lysdiod för volymökning- PÅ
- 19 Kontroll knapp för volymökning (döljs under telefonluren)
- 20 Ringvolym kontroll
- 21 Tonjustering
- 22 Högtalar volymkontroll



Komma igång	6
Kontrollera innehållet i kartongen	6
Ansluta telefonen.....	7
Väggmontering	8
Symboler	10
Använda för första gången.....	11
 Att ringa och ta emot samtal	 14
Att ringa.....	14
Avsluta ett samtal	14
Ta emot ett samtal	15
Aktivering/inaktivering av högtalarfunktionen.....	15
Öka volymen i telefonluren	16
Inställning av volym i telefonluren	16
Tonjustering i telefonluren.....	16
Inställning av högtalarvolymen.....	16
Ringa ett telefonnummer med återuppringningsfunktionen.....	17
Välj ett telefonnummer ur samtalslistan	17

Ringa ett telefonnummer från telefonboken.....	18
Att ringa ett telefonnummer med hjälp av kortnummer	19
Snabbval/Nödsamtal	20
Telefon inställningar	22
Ringvolym	22
Telefonbok	22
Kortnummer	26
Snabbval / Nödsamtal	27
Samtalslista	28
Att ändra inställningarna	30
Bilaga	34
Säkerhetsanvisningar	34
Avsedd användning	34
Installationsläge	34
Kompatibilitet med hörapparat	35
Avfallshantering	36
Hjälp och Support/Felsökning	36

Underhåll	38
Garanti	38
Försäkran om överensstämmelse	39
Index.....	42
Anteckningar	44

Komma igång

Komma igång

Viktigt: Kontrollera att du har läst säkerhetsinformationen på sidan 34 innan du sätter igång.

Viktigt: Telefonen kan producera mycket höga ljud när Boost funktionen är på. Var försiktig om handenheten används av andra.

Kontrollera innehållet i kartongen

Du bör ha:

- 1 telefonbas med sladd
- 1 telefonlur
- 1 sladd för telefonlur
- 1 telefonsladd
- 1 väggfäste
- 1 bruksanvisning


Ansluta telefonen

Din telefon fungerar även utan batterier. När du har en telefonanslutning som drivs med mycket låg matarströmstyrka fungerar batterierna som stöd för visning på displayen. Dessutom säkerställer detta lagrade data om telefonen är skild från telefonanslutningen i mer än 3 minuter.

För att kunna utnyttja **alla telefonens funktioner**, som t.ex. **handsfree** och **höjning av ljudvolymen**, måste du ha tillgång till tillförsel av **ström via batterier**.


1. Sätt i batterierna i den öppna batteriluckan.

Använd endast batterier av typ AA 1,5 V. Uppmärksamma de korrekta polariteterna. Stäng batteriluckan.

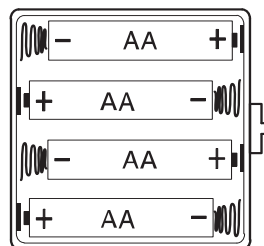

Uppmärksamma att telefonen inte är ansluten i telefonjacket när batterierna sätts in eller byts ut.


2. Anslut telefonen som illustreras i diagrammet. Använd endast den levererade telekabeln, utrustningen kanske inte fungerar om en annan telekabel används.

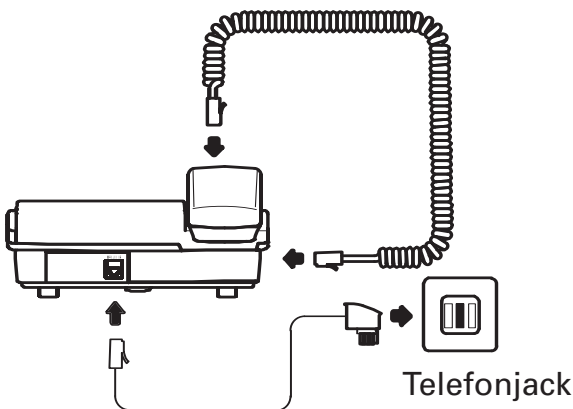

Väggmontering

Telefonen kan också hängas på en vägg. Du måste ha två skruvar för att sätta fast telefonen på en vägg.

Stoppa i flikarna (1) på väggfästet (2) i springorna (3) på den bakre sidan av telefonen. Dra väggfästet (2) 10 mm uppåt, tills man hör att det knäpper till.

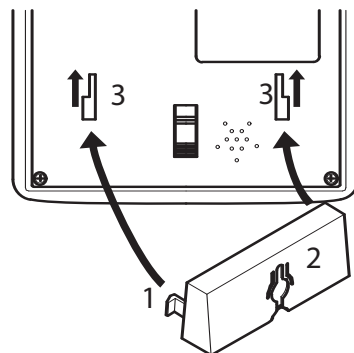


Varning: Se till att det inte finns några kablar eller rör mm bakom väggen där du tänker borra hål.

Borra två hål vars avstånd från varandra motsvarar fästet som skall användas,
Sätt i skruvarna och låt dem sticka ut 5 mm från väggen.

Sätt apparaten på fästet, passa in skruvarna i hålen och dra telefon lite nedåt.

Sätt på telefonluren (4) i telefonklykan 180 grader så att luren kan sitta fast.

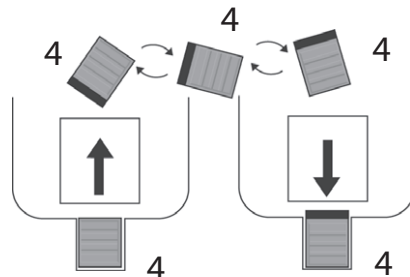

Symboler



Byt ut batterierna.

14:45

Visning av tiden.

11/06

Visning av datum.



Telefonbok är öppen.

CID

Samtalslista är öppen.

NEW

Nytt samtal i samtalslista.



Indikerar ett upprepat samtal.



01

Positionsnummer i samtalslistan.

TOTAL: XX

Det finns XX i samtalslistan.



NEW: XX

Det finns XX som är nya samtal i samtalslistan.

Använda för första gången

När du ansluter telefonen till telefonnätet för första gången eller sätter i batterierna, utförs automatiskt olika grundinställningar. **Om dessa intällningar bryts då telefonen tas i bruk för första gången, t.ex. på grund av att man lyfter på luren, är det möjligt att göra inställningarna vid ett senare tillfälle (se sid. 30).**

På skärmen blinkar **DEUTSCH** (grundinställning vid leverans).

Tryck  eller  för att välja det önskade språket.

Tryck  som bekräftar inställningen.

Skärmen visar **LCD KONTRAST**.

Tryck  eller  för att ändra kontrast (1 2 3 4).

Tryck  som bekräftar inställningen.

Skärmen visar **STÄLL IN TID/DATUM** med blinkande timmar.



Ställ in timmar med  eller  och tryck .


Ställ in minuter med  eller  och tryck .

Ställ in datum med  eller  och tryck  .




Ställ in månad med  eller  och tryck  .

Skärmen visar **STALL IN PAUSTID.**

Välj paustidens längd från (1 – 4 s) med  eller  .

Denna valda paustid används bara när telefonen är i drift. Om det här stycket inte är relevant för dig behöver du bara trycka på  .

Skärmen visar **FLASH TID.**

Tryck  eller  för att välja flash tid (om nödvändigt). I de flesta fall så bör ms 100 (inställning på leverans) väljas. Du behöver inte ändra på någonting. Tryck endast  .

Telefonen är klar att användas och visar viloläge.

Du kan ändra dessa inställningar senare. För mer information vänligen se sidan 30.

**Att ringa och ta
emot samtal**

Att ringa och ta emot samtal

Att ringa

För att ringa ett samtal har du de här alternativen:

- lyft på telefonluren och slå telefonnumret.
- slå telefonnumret och lyft på telefonluren.

eller alternativt

- slå telefonnumret och tryck  eller  .

Högtalarfunktionen aktiveras, och telefonnumret rings upp (det krävs batterier för att använda högtalaren).


- Under ett samtal kan du alltid se samtalstiden på skärmen.

Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal kan du:

- lägga på telefonluren.

eller alternativt

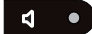- tryck  om samtalet gjordes i högtalarläget (Lysdioden lyser rött på högtalarknappen).



Ta emot ett samtal

Lyft telefonluren eller tryck .

Aktivering/inaktivering av högtalarfunktionen

Under ett samtal du gör med handenheten kan du växla till högtalarläge för att slå på högtalaren (det krävs batterier).


Tryck på  och lägg sedan på luren.

Om du önskar att fortsätta samtalet genom att använda telefonluren, lyft helt enkelt på telefonluren.

Observera:

- Under högtalarläget överförs ert tal via mikrofonen på basen. Tala på ett avstånd av högst 0,5 meter vänd mot framsidan av enheten.
- Höga bullernivåer i bakgrunden kan ge sämre ljud.

Öka volymen i telefonluren

Du kan öka volymen i luren till +30 dB (det krävs batterier). Tryck **+30dB**. Lysdioden  lyser.

För att sätta på förstärkarfunktionen trycker man på tangenten **+30dB** ytterligare en gång. När samtalet kopplas ned stängs i alla fall förstärkarfunktionen av.

Varning: Dessa högtalare kan förorsaka skador för folk med normal hörsel!

Inställning av volym i telefonluren

Du kan justera telefonlursvolymen genom att använda kontrollen (19) (se "Överblick").

Tonjustering i telefonluren

Du kan justera tonen i telefonluren genom att använda kontrollen (21) om Boost funktionen (dB 30) är på (se "Överblick").

Inställning av högtalarvolymen



Du kan justera högtalarvolymen genom att använda kontrollen (22) (se "Överblick").

Ringa ett telefonnummer med återuppringningsfunktionen

Telefonen lagrar det sista telefonnumret som ringdes.

- Lyft telefonluren eller tryck  och därefter tryck .

eller alternativt

- Tryck  och lyft därefter telefonluren eller tryck .

Välj ett telefonnummer ur samtalslistan

I samtalslistan lagras ingångna samtal. Ytterligare information hittar du i avsnittet "Samtalslistan" på sidan 28.

- Lyft telefonluren och tryck , välj sedan det önskade numret med

 och  och tryck .










eller alternativt

- Välj nummer med  och  lyft därefter telefonluren och tryck

.



Ringa ett telefonnummer från telefonboken

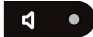För att skapa och lagra namn och nummer i telefonboken se kapitlet "Telefonbok" på sidan 22.



- Lyft telefonluren eller tryck .
 - Tryck , välj önskat nummer med  och  och tryck .
- eller alternativt
- Tryck , välj önskat nummer med  och  och lyft därefter telefonluren eller tryck .

Att ringa ett telefonnummer med hjälp av kortnummer

För att läsa hur man kan lagra kortnummer se "Kortnummer" på sidan 26.


- Lyft telefonluren eller tryck .
- Tryck  och sedan kortnumret (0 ... 9).

eller alternativt


- Tryck  och sedan kortnumret (0 ... 9).
- Lyft telefonluren eller tryck .

Snabbval/Nödsamtal

Snabbvals / nödsamtals knapparna kan användas för att ringa ett nödsamtal eller till personer för hjälp. För att lagra snabbval / nödnummer se "Snabbuppringning / nödsamtal "på sidan 27.

- Lyft telefonluren eller tryck  .
- Tryck på snabbvalsknappen **M1** eller **M2** .

eller alternativt

- Tryck på snabbvalsknappen **M1** eller **M2** .
- Lyft telefonluren eller tryck  .

Notera: telefonnummer som tilldelats snabbvalsknappar kan inte raderas. När du lagrar nya nummer, försvinner de befintliga posterna.

Telefon inställningar

Telefon inställningar

Ringvolym

Du kan justera ringvolymen genom att använda kontrollen (20) (se "Överblick").

Telefonbok

Trettiofyra telefonnummer kan lagras i telefonboken tillsammans med tillhörande namn.

- Lägg alltid in riktnummer med telefonnummer så att telefonen kan tilldela inkommande lokalsamtal till en telefonbokspost.
- När minneskapaciteten av telefonboken används upp, visas **MINNET FULLT** när ett försök görs för att lagra ett till nummer.



Att skapa utrymme, måste ett existerande nummer först tas bort.

- Telefonboken är i alfabetisk ordning. För att hoppa till önskat namn direkt, skriv första bokstaven i motsvarande post

Skriva in ett namn

Sifferknapparna är också märkta med bokstäver för att skriva respektive bokstaver. Bokstäver och siffror får man genom att trycka på motsvarande knapp ett behövligt antal gånger.






Ange ett blanksteg genom att trycka  .

Specialtecken skrivs in med tangenterna  eller  .








Radera en bokstav/siffra genom att trycka  .

För att skriva in samma bokstav två gånger, tryck på knappen för att skriva in bokstaven. Vänta tills markören hoppar ett steg framåt. Ange bokstaven igen.

Skapa telefonbok

- Tryck  .
- Tryck  och bekräfta SPARA? genom att trycka på  .
- Skriv in telefonnummer och tryck  .
- Skriv in namn och tryck  .

Redigera poster i telefonboken

- Tryck  och välj en post med  eller .
- Tryck och håll ned  i 3 sek. och bekräfta REDIGERA? med .
- Skriv in det nya telefonnumret, och bekräfta med .
- Skriv in ett nytt namn, och bekräfta med .

Ta bort en enskild post i telefonboken

- Tryck  och välj en post med  eller .
- Tryck . Skärmen visar RADERA?.
- Tryck och håll ned  i 4 sek. Posten är raderad.

Radera alla poster från telefonboken

- Tryck  och välj en post med  eller  .
- Tryck och håll ned  i 4 sek.

Skärmen visar RADERA ALLA?.




- Tryck och håll ned  i 4 sek. igen.

OBS: För att avbryta en inställning utan att ändra tryck på CID knappen.

Kortnummer

Du kan lagra upp till 10 telefonnummer så att de kan ringas upp genom enkel kortnummersfunktion.

Programmera kortnummer

- Tryck  .
- Skriv in telefonnummer och tryck  .
- Skriv in namn och tryck  .
- Tryck på sifferknappen som kortnumret bör tilldelas.




Notera: För att ringa ett telefonnummer med hjälp av kortnummersfunktionen se sidan 19.

Obs: Ett telefonnummer som har tilldelats ett kortnummer kan inte raderas. När du lagrar nya nummer, skrivs de befintliga posterna över.

Snabbval / Nödsamtal

Du kan använda knapparna **M1** och **M2**, som snabbvalsfunktioner eller som stödfunktion för nödsamtal. Detta kommer att vara snabbare och enklare än uppringning med kortnummersfunktionen eller telefonboken.

Lagra telefonnummer till snabbvalsknappar


- Tryck .
- Skriv in telefonnummer och tryck .
- Skriv in namn och tryck .
- Tryck **M1** eller **M2** för att tilldela telefonnummer till respektive knapp.

Notera: Ett telefonnummer som tilldelas snabbval går inte att radera. När ett nytt nummer lagras skrivs de befintliga posterna över.

Samtalslista

Notera: Nummerpresentatörs funktionen är väsentlig för samtalslistan. Det är en kompletterande tjänst som erbjuds av leverantörer för telefonnätet. Kontakta din nätoperatör för ytterligare information.







Om denna funktion är tillgänglig så visas namn och nummer i skärmen på den som ringer om posten är inlagd i telefonboken. Om den som ringer har valt att dölja sitt nummer visas ett motsvarande meddelande på skärmen. Om ett telefonnummer inte visas så lagras det inte i samtalslistan som ett resultat.

I viloläge visas det hur många poster det finns i samtalslistan och hur många av dem är nya (ännu inte visade). Totalt kan 32 nummer lagras i samtalslistan. Ett nytt samtal i samtalslistan indikeras av att lysdioden blinkar rött. **Lysdioden blinkar så länge det finns inmatningar som inte har kontrollerats. När du vill stoppa blinkningarna trycker du upprepade gånger på -knappen.**







Visa telefonnummer i samtalslistan

- Tryck  eller  och välj en post med  eller .







Att lagra nummer från samtalslistan till telefonboken

- Tryck  eller  och välj en post med  eller .
- Tryck  och bekräfta KOPIERA NUMMER? med .
- Telefonnumret kopieras. För inmatning av ett tillhörande namn se "Ändra telefonboksposter", sidan 23.

Radera enskilt telefonnummer













- Tryck  eller  och välj en post med  eller .
- Tryck . Skärmen visar RADERA?.
- Tryck och håll ned  i ca. 4 sek. Posten är raderad.

Radera alla poster

- Tryck  eller  och välj en post med  eller .
- Tryck och håll ned  i ca. 4 sek.
Skärmen visar RADERA ALLA?.
- Tryck och håll ned  i ca. 4 sek. igen.

Att ändra inställningarna

Du kan ändra inställningar som gjorts vid anslutning av telefonen för första gången (se sidan 11) om det behövs eller när du ansluter telefonen till en telefonväxel.

- Tryck och håll ned  i ca. 5 sek. **Menyn öppnas.**
- Den aktuella inställningen för språk visas.
- Ändra inställningen med  eller  och tryck 
eller tryck  för att behålla den aktuella inställningen.
- Den aktuella inställningen för skärmens kontrast visas.
- Ändra inställningen med  eller  och tryck 
eller tryck  för att behålla den aktuella inställningen.
- Aktuella inställningen för datum och tid visas.
- Ändra timmar, minuter, dag och eller månad med  eller  och tryck 

eller tryck  för att behålla den aktuella inställningen.

- Den aktuella inställningen för paustid visas.

- Ändra inställningen med  eller  och tryck 

eller tryck  för att behålla den aktuella inställningen.

- Den aktuella tiden för flash tid visas.

- Ändra inställningen med  eller  och tryck 

eller tryck  för att behålla den aktuella inställningen.

Flash tid -

I de flesta situationer bör 100 ms på flash tid väljas. I vissa fall t.ex. när du ansluter telefonen till en telefonväxel, kan det vara nödvändigt att byta till 300 eller 600 ms. För ytterligare information hänvisas till användarhandboken för telefonväxel.

Bilaga

Bilaga

Säkerhetsanvisningar

Se till att du läser denna bruksanvisning och sparar den för vidare användning.

Avsedd användning

Telefonen är lämplig för ringa inom det allmänna analoga nätverkssystemet. All annan användning anses oavsiktlig användning. Ändring eller ombyggnad är inte tillåtet. Förbjudet att öppna enheten eller reparera telefonen själv.

Installationsläge

Kontrollera att din telefon:

- är på en torr, jämn och stabil yta eller monteras på en vägg.
- är inte en fara med sina kablar.
- inte utsätts för rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme och direkt solljus.
- är minst en meter från andra elektriska apparater för att undvika störningar.

Se till att tillgång till nätadaptern inte hindras av möbler eller liknande.

Kompatibilitet med hörapparat

Telefonen fungerar med de flesta populära hörapparater. Med tanke på det breda sortiment av hörapparater som finns tillgängliga, kan vi inte garantera att din telefon kommer att fungera fullt ut med varje hörapparat.

Viktigt: Telefonen kan producera mycket höga ljud när Boost är påslagen. Var försiktig om handenheten används av andra.

Avfallshantering

Du är skyldig att göra dig av med förbrukningsvaror på ett korrekt sätt i enlighet med de lagliga bestämmelserna.

Symbolen på produkten visar att elektriska och elektroniska apparater och batterier måste kasseras separat från inhemska avfall på lämpliga insamlingsplatser tillhandahålls av den offentliga avfall myndigheterna. Batterier kan också ofta tas om hand vid försäljningsstället.



Förpackningsmaterial måste kasseras enligt lokala föreskrifter.



Hjälp och Support/Felsökning

Har du problem med din telefon, bör du först kontrollera förljande anvisningar. Vid tekniska problem vänder man sig vår Service-Hotline.

Telefonnumret hittar du på vår hemsida **www.amplicomms.com**

Vid garantifrågor vänder du dig till din återförsäljare. Garantitiden är 2 år.

Jag kan inte ringa samtal

- Kontrollera att telefonkabeln är korrekt ansluten. Om den är det, kan det finnas ett fel. Se till att du använder telefonsladden som medföljer telefonen.

Bredvid displayen blinkar en röd lampa

Du har nya samtal. Bläddra igenom samtalslistan med hjälp av piltangenterna. Om du har tittat på posten blinkar inte lampan längre. (Se sidan 28).

När telefonen används kan störningar höras i högtalaren/internet är väldigt långsamt.

- Beställ med telefonen ett ADSL-filter på anslutningsdosan på väggen, när bredbandet/internetanslutningen installeras på din telefonledning.

Visning på displayen är mycket svag

- Sätt i batterierna eller byt ut de isatta batterierna, då dessa uppenbarligen måste laddas.

Visning av inkommande samtal nummer fungerar inte

- Kontrollera att du har den här tjänsten på din telefonlinje. Ring din nätverks leverantör.
- Den som ringer kan ha hemligt telefonnummer.

Underhåll

- Rengör utrustningens ytor med en mjuk, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Garanti

Denna apparat har två års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under åskväder.

När det gäller klagomål, förbehåller vi oss rätten att reparera eller ersätta defekt delar eller utbyta enheten. Reservdelar eller enheter blir vår egendom. Rätt till ersättning i händelse av skada är uteslutet om det inte finns någon bevis eller uppsåt eller grov oaktsamhet av tillverkaren.

Om din utrustning visar tecken på fel under garanti, vänligen tillbaka till försäljningsstället där du köpte AMPLICOMMS utrustning tillsammans med inköpskvitto. Alla rättigheter till fordringar enligt villkoren i

garantin i enlighet med detta avtal måste hävdas enbart med När det gäller din försäljningsställe.

Två år efter köp av våra produkter, hävdar enligt villkoren i garantin kan inte längre göras gällande.

Försäkran om överensstämmelse



Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet:

1999 / 5 EU-direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning utrustning och om ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse.

Överensstämmelse med ovannämnda direktiv bekräftas av CE-märket på enheten.

Du hittar hela försäkran om överensstämmelse finns på vår hemsida **www.amplicomms.com**

Index

Index

A

Ändra inställningarna.....	30
Ansluta telefonen.....	7
Användning för första gången... ..	11
Återuppringning.....	17
Avfall.....	36
Avsedd användning.....	34
Avsluta ett samtal.....	14

B

Batterier.....	36
----------------	----

F

Flash tid.....	12, 31
Försäkran om överensstämmelse.....	39

G

Garanti.....	38
--------------	----

H

Högtalarfunktion.....	15
Högtalarvolym.....	16

Hörapparat.....	35
-----------------	----

I

Inställningar.....	22
--------------------	----

K

Kartongens innehåll.....	6
Kontrollera att din telefon.....	34
Kortnummer.....	19, 26

N

Nödsamtal.....	20
----------------	----

P

Paustid.....	12, 31
--------------	--------

R

Redigera poster i telefonboken ..	24
Ring läge.....	14
Ringvolym.....	22

S

Säkerhetsanvisningar.....	34
Samtalslistan.....	28
Skapa telefonbok.....	23

Skärm symboler	10
Skriva in ett namn	23
Snabbval	20
Spara nummer från samtalslistan i telefonboken	29

T

Ta emot ett samtal	15
Telefonbok	22
Tonkontroll i telefonluren	16

U

Underhåll	38
---------------------	----

V

Väggmontering	8
Visning av telefonnummer i samtalslistan	28
Volym i telefonluren	16

Anteckningar



Utdelat by: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

07/2013 – Utfärda 2.0

