

TA 10

Universal Telefonforsterker

Bruksanvisning




TA 10 kommer med følgene:

Telefonforsterker TA 10
Bruker veiledning
Kort kabel.
9 V Batteri

Beskrivelse:

1. Volumhjul
2. PÅ / AV Indikator
3. Kompatibilitets Bryter
4. Tonekontroll
5. Kontakt håndsett
6. Forsterknings-knapp og LED
7. Kontakt til telefon
8. Kontakt for DC adapter
9. Batteri deksel

Enheten kan drives av et 9V batteri .

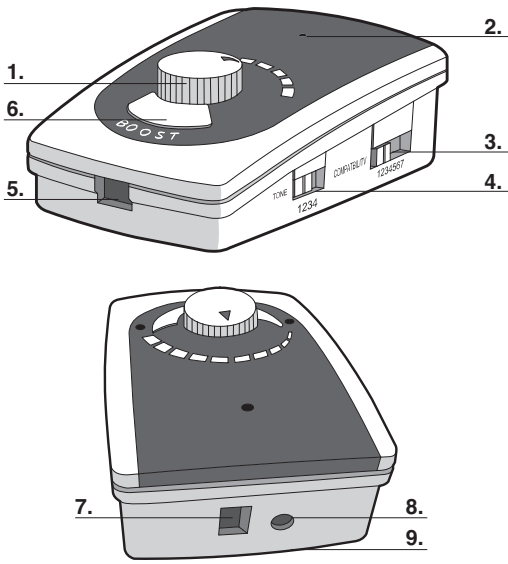

Takk for at du valgte TA 10 telefon forsterker. Denne forsterkeren er kompatibel med nesten alle typer telefoner på markedet. Enheten forsterker opp lyden på innkommne samtaler.

Sikkerhetsinformasjon

Viktig: Telefonen kan produsere svært høy lyd når forsterkeren er slått på og volumhjulet er skrudd opp til maks. Vær oppmerksom på dette hvis andre også bruker håndsettet.

- Les brukerveiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk.
- Bruk bare tilbehør som er anbefalt eller solgt av produsenten.
- Ikke bruk den utendørs. Ikke bruk den nær vann som foreksempel i nærheten av ett badekar, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et badebasseng.
- Koble ikke i fra ved å dra i kabelen. For og koble fra, ta tak i pluggen, ikke kabelen.
- Bruk ikke apparatet hvis pluggen eller kabelen er skadet, eller hvis apparatet er skadet på noe som helst måte. Returner apparatet til den nærmeste forhandleren for undersøkelse, reparasjon, eller for elektrisk eller mekanisk justering.
- Bruk kun strømledningen (følger ikke med) og batterier som vist i brukerveiledningen. Kast ikke batteriene på åpen varme, de kan eksplodere.
- Når du bruker en nettadapter (følger ikke med) plugg den inn i en stikkontakt nær utstyret og pass på så den er lett tilgjengelig.
- Unngå bruk av telefon når det er tordenvær. Det er en mulighet for å få elektrisk overslag av lynet.
- Ved gass lekkasje i nærheten, ikke bruk telefonen.


Tiltenkt bruk

Dette apparatet er egnet for oppkobling til en kablet telefon.. All annen bruk blir ansett som utilsiktet . Uautorisert modifisering eller rekonstruksjon er ikke tillatt. Du må ikke under noen omstendighet åpne apparatet eller forsøke å utføre reparasjoner selv.


Installasjon og bruk

1. Sett inn ett 9 Volts batteri og koble TA 10 til telefon håndsettet som vist. Bruk en mynt eller lignende til å åpne batteri luken. Bruk kun den “korte kabelen” for og koble TA 10 til telefon basen. (**Merk:** Ignorer AV / PÅ indikator mens du stiller inn bryter. Det er ikke nødvendig på dette tidspunktet.)


For din egen sikkerhet, koble alltid fra TA 10 fra din telefon base.

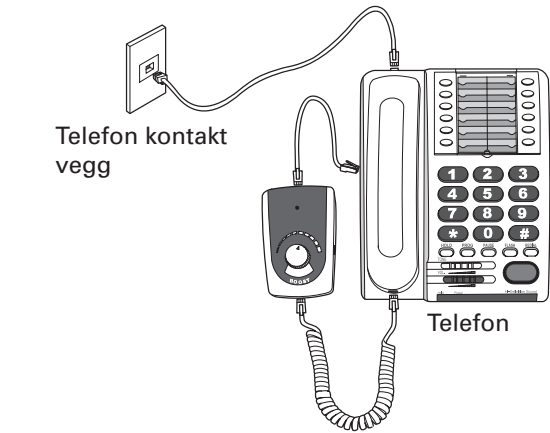

2. Still inn volumkontrollen til midt punktet. Sett tonekontroll bryter til posisjon 2.

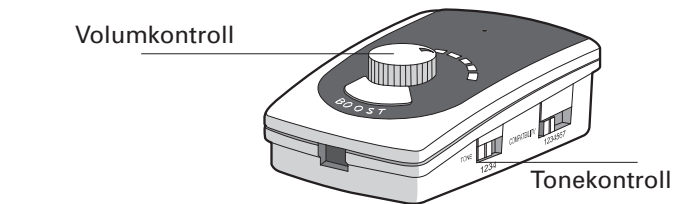


3. Stille inn kompatibilitets bryter: Det er 7 posisjoner på denne bryteren. Posisjon 1 – 6 brukes til kompatibilitetsinnstilling. Posisjon 7 er en “by-pass” posisjon og er ikke til bruk i vanlig innstilling. Posisjon 7 gir ikke noe forsterkning og bør bare brukes i nødsituasjoner ved strøbrudd.

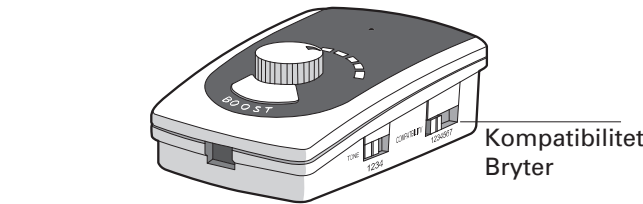


- A. Sett bryteren til posisjon 1 (Merk: Dette er den mest populære innstillingen og blir brukt på de fleste telefoner. Ignorer PÅ / AV indikatoren mens du stiller inn denne bryteren.. (Det er ikke nødvendig på dette tidspunktet.)
- B. Løft opp håndsettet og bekreft at du kan høre en klar summetone.
- C. Hvis det ikke er en klar tone, legg på håndsettet og flytt kompatibilitets bryteren til neste posisjon og repeter steg B.
- D. Hvis du får en klar summetone, bekreft at styrken på summetonen kan justeres ved og vri på volumhjulet. Hvis styrken på summetonen forandrer seg gå videre til steg F.
- E. Hvis styrken på summetonen ikke forandrer seg ved og vri på volumhjulet, legg på håndsettet og flytt kompatibilitets bryteren til neste posisjon. Repeter steg B.
- F. Ta en samtale med telefonen og bekreft at dere kan høre hverandre.
- G. Hvis dere kan høre hverandre, betyr det at du har riktig innstilling på kompatibilitets bryteren. Gå videre til steg 4.
- H. Hvis ikke, prøv neste posisjon på kompatibilitets bryteren til dere kan høre hverandre klart og tydelig. (Merk: Prøv gjerne flere bryter-innstillinger.)

4. Mens du prater i telefonen, sjekk om du kan variere styrken på håndsettet ved og vri på volumhjulet på forsterkeren. (Forsiktig: Juster ned volumet hvis du opplever en pipelyd i håndsettet).

5. Mens du prater i telefonen, prøv forskjellig innstillinger på tonekontrollen for og få best mulig lyd kvalitet. Juster ned volumet hvis du opplever en pipelyd i håndsettet. Behold denne innstillingen for alle fremtidig samtaler Du trenger ikke og forandre tonekontrollen senere.

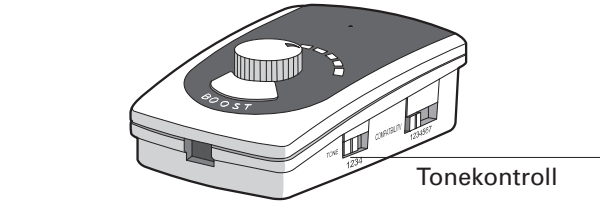


6. Trykk og hold BOOST knappen nede. Sjekk om den innkommende stemmen blir høyere og BOOST LED lyser. Hvis knappen holdes nede vil stemmen din bli dempet.

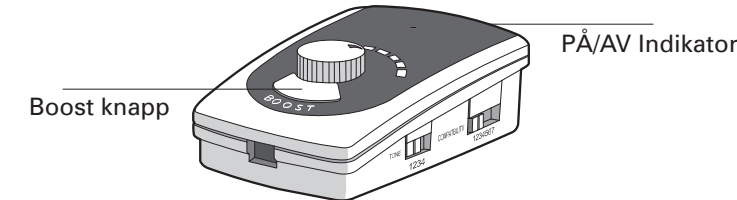

7. Lyset til PÅ / AV indikatoren skal lyse når telefonen er i bruk. Det vil slukke 10 – 20 sekunder etter du har lagt på røret (eller hvis det ikke er noe lyd i 10 – 20 sekunder).

8. Ved normal bruk vil det 9 Volts alkaliske batteriet vare i 6 – 12 måneder . Bytt batteri hvis PÅ / AV indikatoren blir svak eller hvis mottakerlyden blir forvrengt.

9. En 9 Volts DC adapter kan også brukes (medfølger ikke). Denne adapteren gir normal bruk samtidig som batteriet fungerer som en back-up ved strøbrudd. Batteriet burde byttes hvert andre år eller før, hvis du ser at PÅ / AV indikatoren ikke kommer på ved ett strøbrudd.

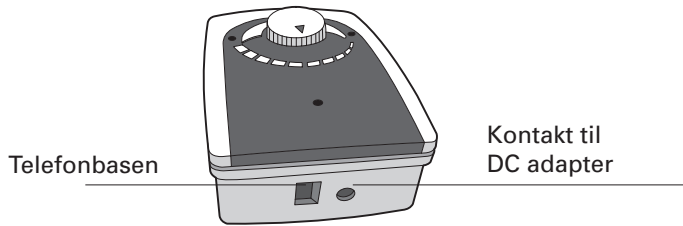

Hjelp og støtte / Feilsøkingssguide

Les gjennom de følgende henvisningene hvis utstyret ikke fungerer som det skal. Ved tekniske problemer bes du ta kontakt med vår kundeservice. Telefonnummeret finner du på vår hjemmeside www.amplicomms.com Ved reklamasjonskrav bes du ta kontakt med din forhandler. Garantien gjelder i 2 år.

- PÅ / AV indikatoren er svak: Bytt batteri.
- Kan ikke høre summetone eller hverandre: Pass på så kompatibilitets bryteren står på riktig innstilling. Hvis nødvendig repeter A – D av installasjonen, Steg 3.
- Det er en høy pipelyd i håndsettet: Volumet er stillt for høyt, skru ned volumet.

Spesifikasjoner

Strømkilde: 9 volt alkalisk batteri eller DC adapter
Vanlig batteriforbruk er på 10 mA I; Skru seg automatisk av hvis ingen prater.
Batteriet varer 6 – 12 måneder ved normal bruk.
Forsterkning uten Boost er på 30 dB
Forsterkning med Boost er på 45 dB
Skru seg automatisk av etter 10 – 20 sekunder hvis ingen prater. (batteri sparing)
Kompatibilitets bryter (6 posisjoner) + en “by-pass” posisjon
Indikator for PÅ / AV og BOOST
Volumkontroll, BOOST, Tonekontroll, Kompatibilitet
AC adapter 9 V DC, 300 mA
Bruks temperatur 0 to 45° C
Lagings temperatur -20 to 50° C



Deponering

Deponering av forbruksartikler skal skje i samsvar med gjeldende forskifter. Symbolet på produktet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må kasseres separat fra husholdningsavfall ved dedikerte innsamlingssteder. Batterier kan ofte kasseres der de ble kjøpt. Emballasjen må kasseres i samsvar med lokale forskrifter.



Vedlikehold

- Rengjør overflatene på apparatet med en myk, lofri klut.
- Bruk aldri rengjøringsmidler eller løsemidler.

Garanti

AMPLICOMMS-utstyr produseres og testes med de nyeste produksjonsfremgangsmåtene. Bruken av samvittighetsfullt utvalgte materialer og høyt utviklede teknologier sikrer en drift uten forstyrrelser og med lang levealder. Garantien gjelder ikke for oppladbare batterier, ladere eller batteripakker som brukes i produktene. Garantitiden varer i 24 måneder fra og med kjøpsdato. I løpet av garantitiden korrigeres alle mangler som skyldes materiell eller produksjonsfeil, gratis. Garantien opphører ved inngripen fra kjøper eller tredjeperson. Garantien gjelder ikke ved skader som oppstår som følge av inadekvat behandling eller betjening, gal plassering eller lagring, inadekvat tilkobling eller installasjon, høyere makter eller annen ytre påvirkning. Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller bytte ut defekte deler eller stille nytt utstyr til rådighet. Deler eller utstyr som blir byttet ut, tilfaller oss. Skadeerstatning er utelukket hvis det ikke kan påvises at produsenten har vært forsettlig eller grov uaktsom. Hvis utstyret blir defekt i løpet av garantitiden, tar du kontakt med butikken hvor du kjøpte AMPLICOMMS-utstyret og viser frem kvitteringen. Reklamasjonskrav i henhold til disse bestemmelsene kan kun fremmes overfor forhandleren. Ingen garantikrav kan gjøres gjeldende mer enn to år etter at produktene ble kjøpt.

Samsvarserklæring

Apparatet oppfyller kravene som angitt i EU-direktivet: EU-direktiv 1999/5 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar. Konformitet med ovennevnte direktiv bekreftes med CE-symbolet på apparatet. For å se hele samsvarserklæringen, se gratis nedlasting på hjemmesiden www.amplicomms.com

